

# VISION

EDTA'lı Tüpten Ölçüm

Mükemmel Korelasyon

Modüler Yapı

Türkçe Menü


Uzaktan Destek

Kolay Kullanım

Biyolojik Güvenlik



Tam Otomatik  
Sedimentasyon Analizörü

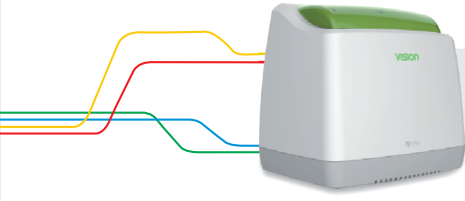

# VISION

Farklı modelleri ile saatte 24, 48 ve 96 test hız sunan sedimentasyon analizörleri.



## Kullanım Kolaylığı

EDTA'lı tüpten doğrudan ölçüm yapabilme  
Türkçe arayüz  
Dokunmatik ekrana sahip kontrol ünitesi



## Avantajlar

Biyolojik risk olmadan kapalı tüp ile çalışabilme  
10.000 Hasta ve Kontrol hafızası  
Hasta ve kontrol sonuçlarını Lis'e aktarabilme



## Yöntem/Doğruluk

Kızılötesi okuma teknolojisi ile gerçek zamanlı sedimentasyon analizi  
Westergren methodu ile yüksek korelasyon [% 97]



## Farklı Kapasitede Çözümler/Hız

Laboratuvarın ihtiyacına göre 24, 48, 96 test/saat yükleme kapasitesi ve modüler kullanımla 10 kata kadar daha hızlı sistemler.\*




## Otomasyon

Tüpleri otomatik karıştırabilme  
Ortam sıcaklığına göre sonuç yorumlayabilme  
Eş zamanlı sedimentasyon eğrisi izleyebilme



## Servis

Bakım gerektirmeyen modüller  
Yılda <2 servis gereksinimi  
Uzak bağlantı ile online servis desteği

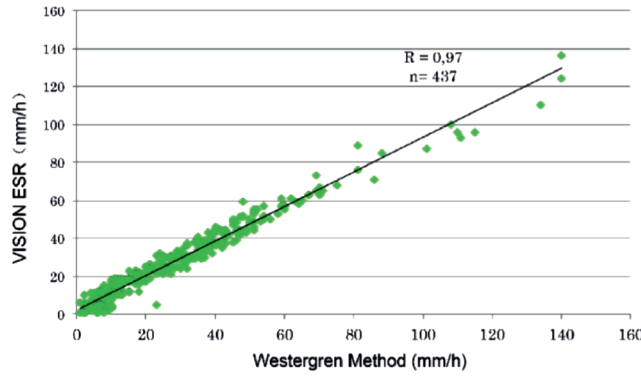

\*Tek bir kontrol ünitesi ile 10 analizöre kadar modüler sistemler oluşturulabilir. Modüler sistemler ile daha hızlı ve daha fazla yükleme kapasitesine sahip çözümler sunulabilir. (960 test/saat hız ve 320 tüp yükleme kapasitesine kadar)



Türkiye Distribütörü

**nova**  
DIAGNOSTICS

Nova Diagnostik Tıbbi Cihazlar A.Ş.

☎ 0322 232 80 18 📠 0322 232 22 83

www.novadia.com.tr / info@novadia.com.tr

Bölge Bayii: